


Smile Line ☺
made in switzerland

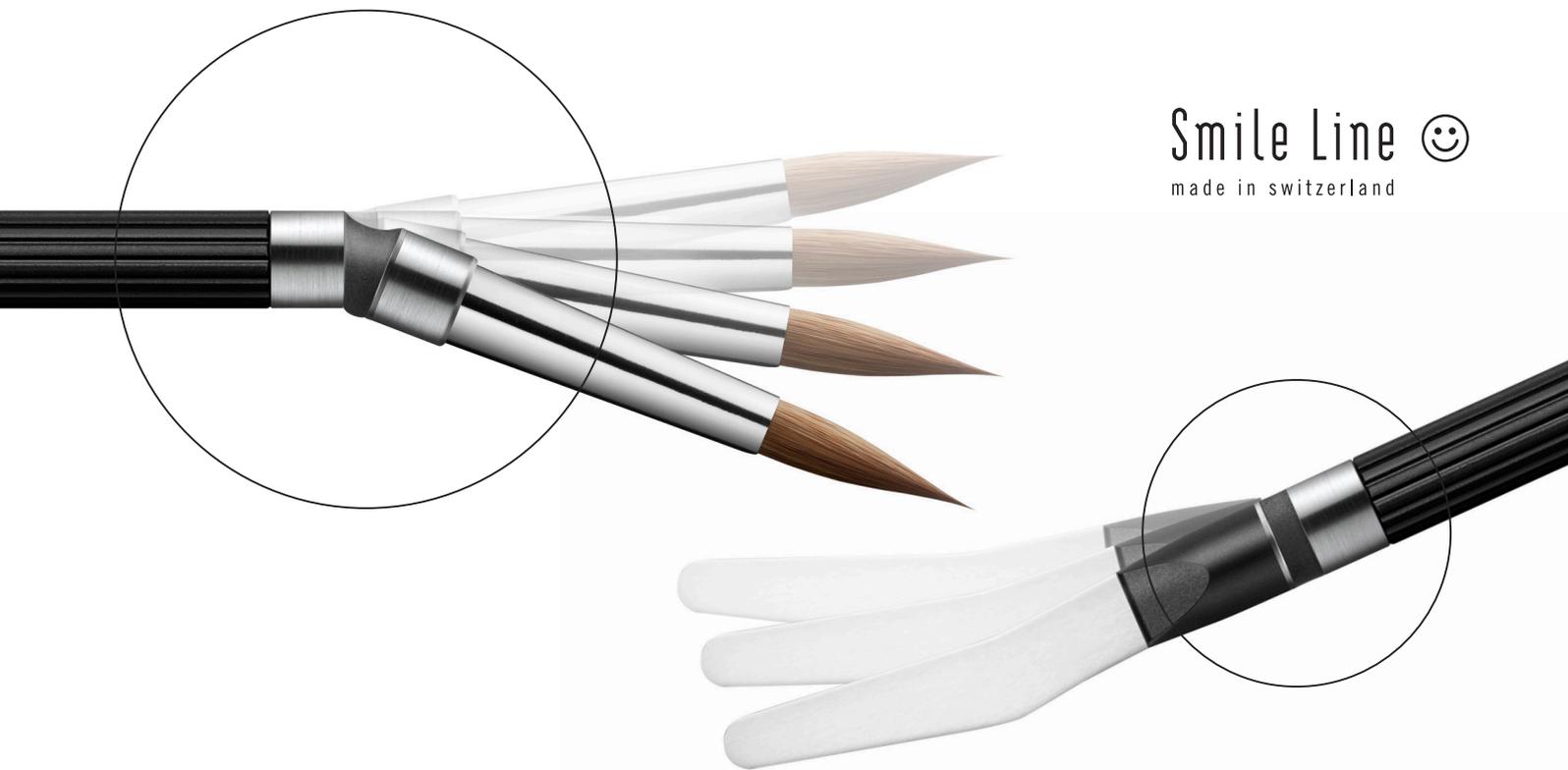

FLEXMOUNT

simple – comme la plupart des idées brillantes

«**FlexMount**» est une connexion flexible (en caoutchouc naturel) qui permet de coupler manche d'instrument et outil pour un nouveau feeling de travail. L'idée de ce nouveau concept s'applique à Instrument by Smile Line, plus particulièrement à notre spatule ZR et nos pinceaux de montage céramique.



« FlexMount » et votre spatule ZR-



La zircone est un matériau high-tech qui n'a pas d'élasticité naturelle et qui est fragile pour ce type d'application. « FlexMount » fonctionne tel un amortisseur et procure à son utilisateur sécurité et confort de travail accrus durant le mélange de la céramique ou des stains.



« FlexMount » et votre pinceau de montage céramique-

«**FlexMount**» permet l'activation de la partie antérieure du pinceau d'un claquement de doigt et vous apporte les avantages suivants.

Effet n° ① Il est primordial d'avoir un certain taux d'humidité à la pointe du pinceau pour un placement précis et confortable de la céramique. L'action « FlexMount » a pour résultat d'accélérer l'humidité vers la pointe du pinceau.

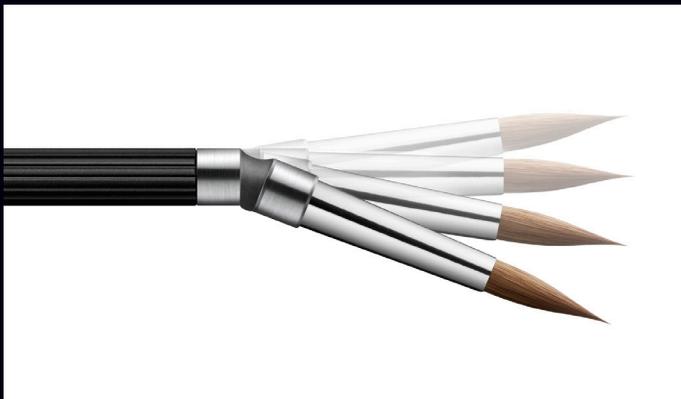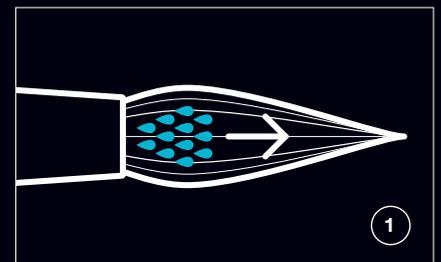

Effet n° ② Une pointe acérée, précise et stable est indispensable durant le montage céramique. Ceci est essentiellement donné par la qualité du poil et le soin porté à la construction du pinceau. Un léger claquement du pinceau juste avant la prise de céramique aide à la reformation d'une très belle pointe, instantanément.

FLEXMOUNT

Conseil d'utilisation

L'idée n'est pas tant de claquer le pinceau à peine sorti du récipient d'eau. Ceci a comme effet d'éclabousser de gouttes d'eau la place de travail. Non seulement ce n'est pas très confortable mais également ça ne permet pas le meilleur contrôle de l'humidité. Notre proposition est un premier «arrêt» sur l'éponge de la station H₂O pour extraire l'excès d'humidité de la tête du pinceau.

Ce n'est qu'ensuite, durant le montage céramique – entre deux portions – que l'avant du pinceau est activé et est très utile grâce à la connexion « FlexMount ». Il vous permet tout à la fois de redonner de l'humidité à l'extrémité de votre pinceau tout en retrouvant une pointe hyper-acérée.



«FlexMount» est compatible avec les produits suivants :

- Spatule ZR
- Têtes Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 *
- Tête N.era #8 *

Détail produits



* **IMPORTANT** : les têtes de pinceaux pour « **FlexMount** » sont l'objet d'une toute nouvelle production de qualité supérieure et garantie. De même, elles sont livrées avec une virole raccourcie qui permet plus de ressort.

FLEXMOUNT


Pour votre commande

Instrument by Smile Line est une ligne modulable à souhait. Si vous avez un manche en réserve, nous vous conseillons de commander un module complet « connexion flexible + outil ». De la sorte, vous bénéficiez de la version de pinceau avec virole courte.

Le nec plus ultra évidemment est de demander votre set personnel «**FlexMount – 2 instruments**» qui contient un pinceau et une spatule ZR. Vous pouvez le personnaliser en choisissant votre pinceau préféré, mais également en décidant d'opter pour les manches traditionnels en aluminium anodisé, ou alors pour les nouveaux et très élégants manches en fibre de carbone.



FIBRE DE CARBONE

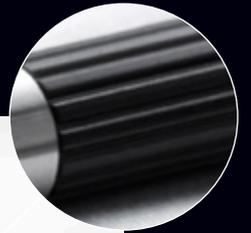

ALUMINIUM ANODISÉ



#FL-14150-CA6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-CA8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-CA8N **N.era 8 + ZR**



#FL-14150-8N **N.era 8 + ZR**



FLEXMOUNT

UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE, UN STYLE UNIQUE, UN CARACTÈRE EXCLUSIF... LES RAISONS D'ACQUÉRIR UN OBJET SMILE LINE NE MANQUENT PAS.

Smile Line 
made in switzerland