


Smile Line ☺
made in switzerland

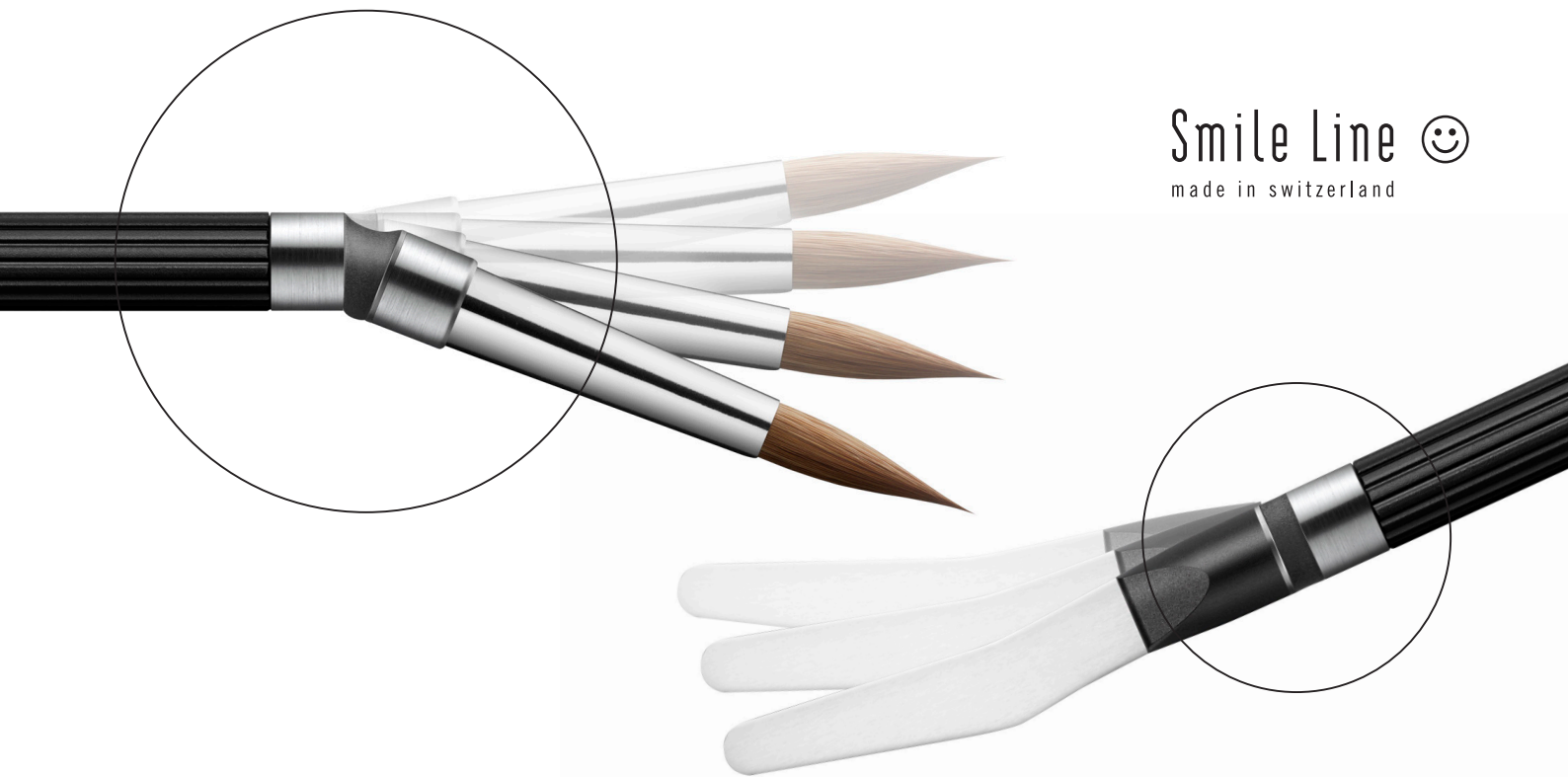

FLEXMOUNT

simpel - wie alle großen Ideen

Smile Line stellt **"FlexMount"** vor, einen flexiblen Kautschuk-Konnektor für Griff- und Werkzeug-Module. Dieses neue Konzept ist speziell auf Instrument by Smile Line abgestimmt, insbesondere auf den Zirkon-Spatel und die Keramikpinsel.



„FlexMount“ mit Ihrem ZR Spatel



Zirkonoxid ist ein High-Tech Material ohne natürliche Elastizität, in der Anwendung wird es daher schnell zerbrechlich. **„FlexMount“** wirkt als Stoßdämpfer und bietet somit ein Maximum an Komfort und Gefühl beim Mischen von keramischen Massen oder Malfarben.



„FlexMount“ mit Ihrem Keramikpinsel

„FlexMount“ erlaubt es Ihnen, der Pinselspitze mit leichtem Schnippen einen Impuls zu geben.

Aufgabe ① - die Pinselspitze muss für präzises und komfortables Positionieren der Keramik über die richtige Menge an Feuchtigkeit verfügen. Ein leichtes Schnippen „beschleunigt“ die notwendige Feuchtigkeit aus dem Bauch des Pinsel zur Spitze.

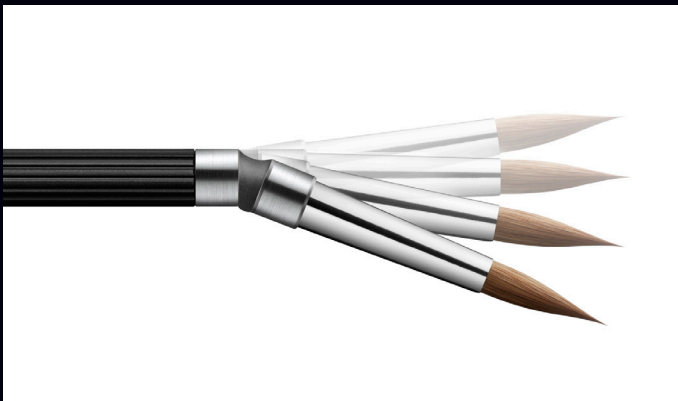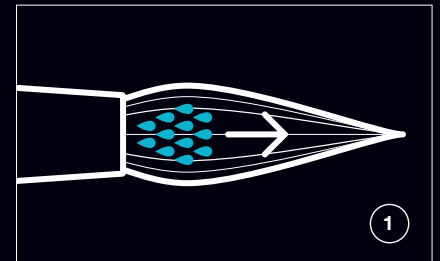

Aufgabe ② - wir müssen über eine äußerst präzise, scharfe und stabile Pinselspitze verfügen. Dies wird vor allem durch die Qualität der Haare und der Art und Weise bestimmt, wie die Spitze konstruiert wurde. Ein leichtes Schnippen vor dem Aufnehmen der Keramik hilft der Spitze, sich wieder scharf auszuformen.

FLEXMOUNT

Anwendung & Hinweis

Der Fingerschnipp direkt nach der Entnahme aus dem Wasserbehälter ist nicht die Idee dahinter. Dies verteilt das überschüssige Wasser im Arbeitsbereich und erlaubt auch nicht die Feuchtigkeitskontrolle in der Pinselspitze.

Smile Line empfiehlt zunächst einen "Stopp" auf dem H₂O-Schwamm, so wird der Überschuss an Feuchtigkeit aus der Pinselspitze entfernt.

Beim Keramik Build-up kann man vorsichtig schnippen, z.B. zwischen 2 Aufbausritten der Keramikmasse. Mit dieser Methode wird automatisch ausreichend Flüssigkeit in die Pinselspitze geführt, und sie erhält ihre ideale Form zurück.



"FlexMount" ist mit den folgenden Produkten kompatibel:

- Smile Line's Zr Spatel
- Smile Line's Kolinsky Pinselspitzen #8-R, #8-LT, #6 *
- Smile Line's N.era 8 Pinselspitzen *

Product detail




* **Hinweis:** Pinselspitzen für "Flex-Mount" sind völlig neue high-end Produktion. Sie bieten eine kürzere Hülse für mehr Elastizität.

FLEXMOUNT


Wie und was sollte bestellt werden?

Smile Line versucht stets die Mehrzahl der Produkte modular anzubieten, so auch bei den Instrument Komponenten. Sofern Sie bereits über einen Ersatz-Instrumentengriff verfügen empfehlen wir Ihnen das vollständige **“FlexMount”** Modul zu bestellen. So profitieren Sie vom Mehrwert der kürzeren Hülse.

Eine weitere, günstige Möglichkeit ist Ihr persönliches **“FlexMount - 2 Instrumenten Set”**, das einen Pinsel und einen Zr Spatel enthält. Sie können Ihr Set so individualisieren, dass Ihre Lieblings-Pinselgröße und Ihr bevorzugtes Griffmaterial berücksichtigt wird. Die Griffe sind wahlweise in der neuen, eleganten Kohlefaservariante oder klassisch aus anodisiertem Aluminium erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler!

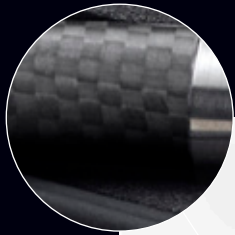

KOHLEFASER

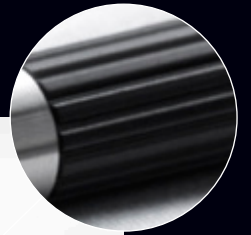

ANODISIERTES ALUMINIUM



#FL-14150-CA6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-CA8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-CA8N **N.era 8 + ZR**



#FL-14150-8N **N.era 8 + ZR**



FLEXMOUNT

ERSTKLASSIGE QUALITÄT, EINMALIGER STIL UND EINEN EXKLUSIVEN CHARAKTER... SIND GRÜNDE SMILE LINE PRODUKTE ZU ERWERBEN.

Smile Line ☺
made in switzerland