


Smile Line ☺  
made in switzerland

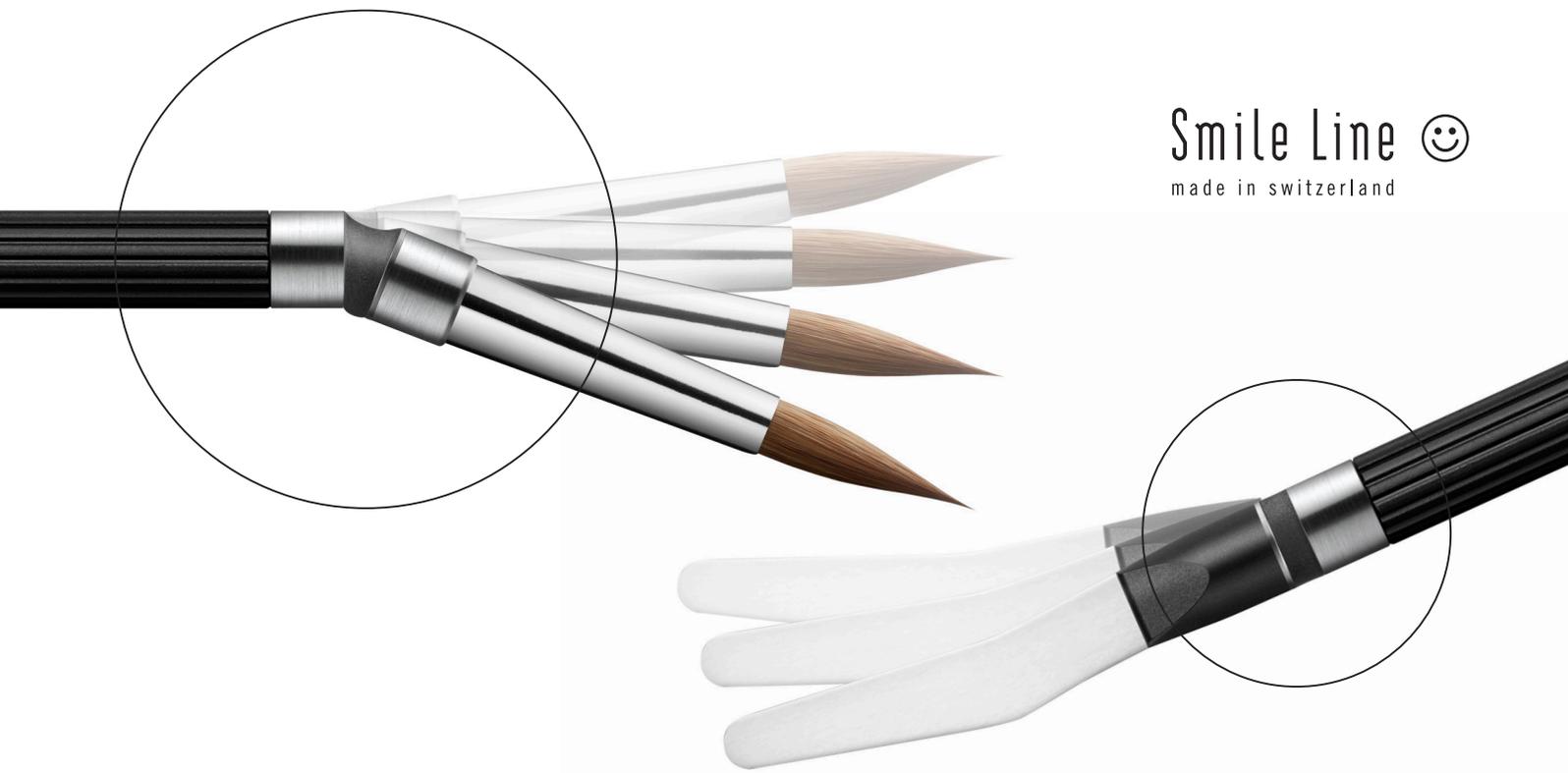

## FLEXMOUNT

simple - así como toda gran idea

Smile Line presenta «**FlexMount**», una conexión flexible en caucho para ensamblar el mango y el instrumento. Este nuevo concepto se adapta a los instrumentos de Smile Line, en particular a nuestra espátula ZR y a nuestros pinceles para porcelana.



## „FlexMount“ con vuestra espátula ZR



El circonio es un material de alta tecnología que no posee una elasticidad natural y es frágil para el uso que hacemos. «**FlexMount**» funciona como un amortiguador y proporciona la máxima comodidad durante la mezcla de la porcelana o de los maquillajes.



## „FlexMount“ con vuestro pincel para cerámica

El «**FlexMount**» permite aplicar un pequeño chasquido a la punta del pincel.

Desafío ① : necesitamos que la punta del pincel tenga la justa humedad para depositar la cerámica de manera precisa y cómoda. Un pequeño chasquido “acelera” la humedad necesaria desde el centro hasta la punta del pincel.

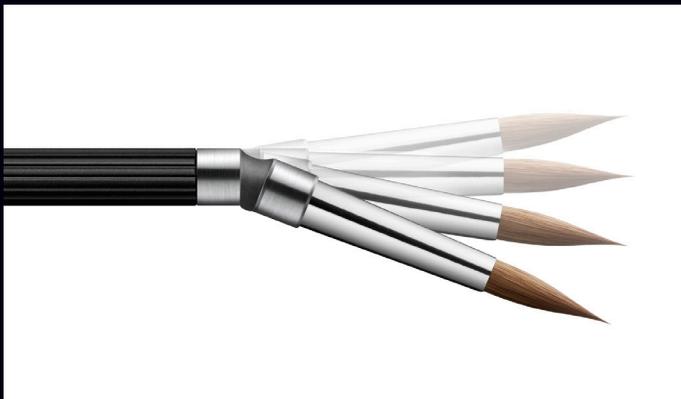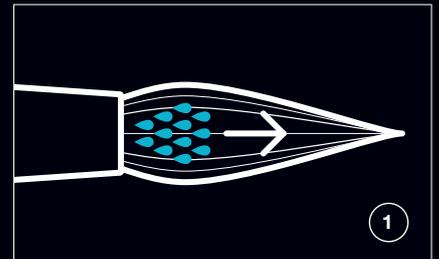

Desafío ② : necesitamos una punta de pincel extremadamente precisa, aguda y estable. Esto principalmente es proporcionado por la calidad del pelo y el modo en que la punta es construida. Un chasquido delicado justo antes de recoger la porcelana ayuda al pelo de la punta a volverse agudo.

FLEXMOUNT

## Uso y consejo

La idea no es hacer el chasquido al pincel inmediatamente de sacarlo de la taza de agua. Esto salpicaría de agua alrededor del espacio de trabajo y además este método no permite el mejor control de la humedad en la punta del pincel. Aconsejamos como primera acción pasar el pincel sobre la esponja del H<sub>2</sub>O para extraer el exceso de humedad en la punta del pincel.

Entonces, sólo durante el build-up de la cerámica, podemos delicadamente hacer un chasquido, por ej. entre dos tomas de cerámica. Con este método, la punta de su pincel recibe automáticamente la humedad ideal y vuelve a su forma más aguda.



«FlexMount» es compatible con los productos siguientes:

- espátula ZR
- puntas Kolinsky #8-R, #8-LT, #6 \*
- punta N.era #8 \*

Detalles producto



\* **Nota:** las puntas de pinceles para «FlexMount» son completamente nuevas y con una producción de muy alta calidad. Además, tienen una virola más corta para más elasticidad.

**FLEXMOUNT**


¿cómo y qué pedir?

SL siempre provee las partes de instrumentos separadas, ya que la mayoría de nuestros artículos son modulares. Si ya tienen un mango de instrumento SL, le aconsejamos pedir el módulo completo "conector flexible y punta" para beneficiarse de la virola más corta.

Otra opción favorable es pedir su personal «**FlexMount – set 2 instrumentos**» que contiene un pincel y una espátula de circonio. Puede personalizar su conjunto escogiendo su tamaño de pincel favorito y su material preferido para el mango. Los mangos están disponibles en la nueva y elegante fibra de carbono o en el tradicional aluminio anodizado. ¡Pregunte a su distribuidor!



FIBRA DE CARBÓN

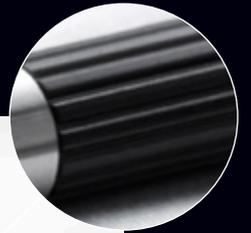

ANODIZED ALUMINUM



#FL-14150-CA6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-6 **Kolinsky #6 + ZR**



#FL-14150-CA8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-8K **Kolinsky #8R + ZR**



#FL-14150-CA8N **N.era 8 + ZR**



#FL-14150-8N **N.era 8 + ZR**



FLEXMOUNT

UNA CALIDAD SUPERIOR, UN ESTILO ÚNICO, UNA SENSACIÓN EXCLUSIVA... HAY SUFICIENTES RAZONES DE POR QUÉ COMPRAR UN OBJETO DE SMILE LINE.

Smile Line   
made in switzerland